


Table d'opération



Exaflex 6126

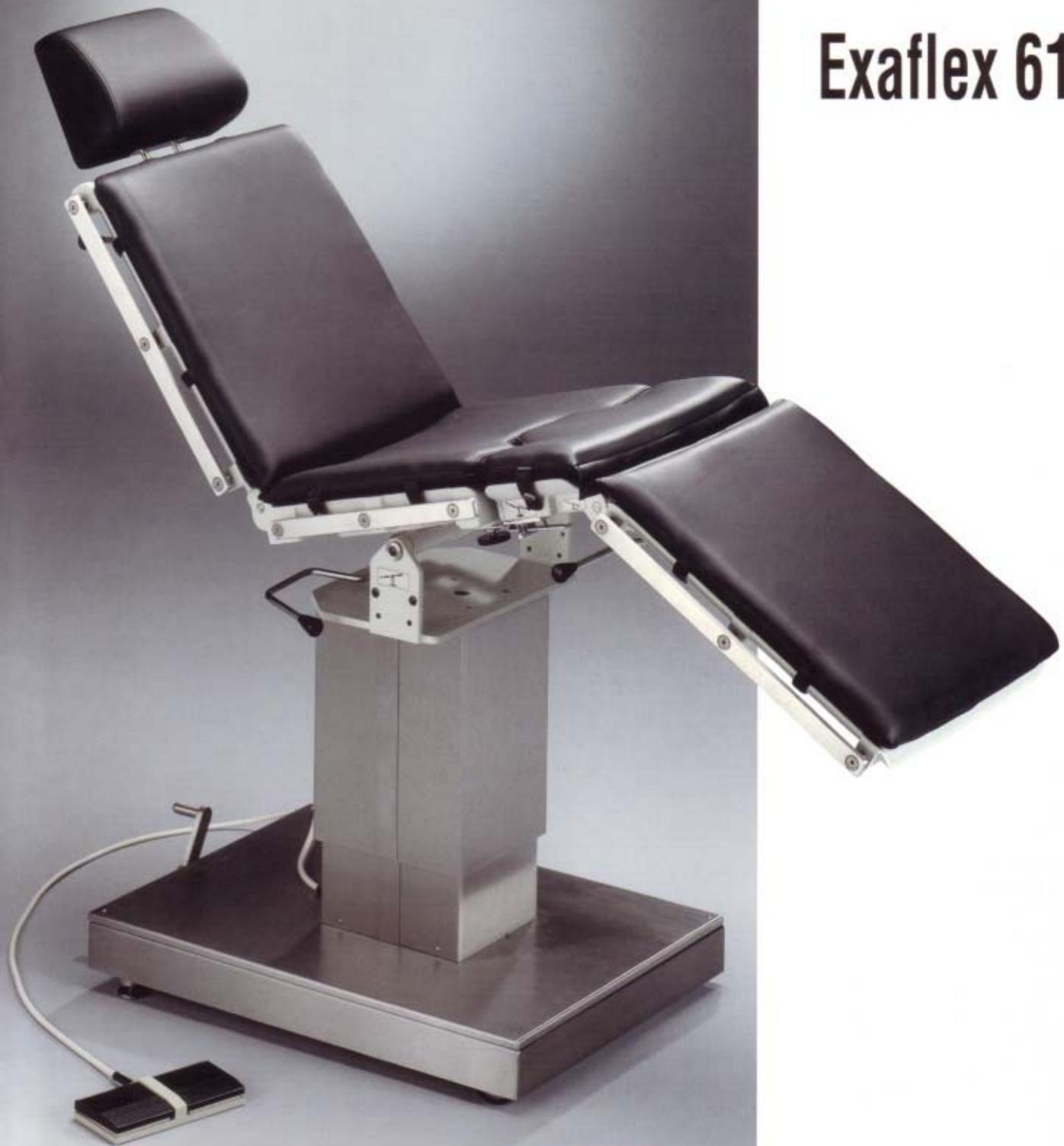

jörg&sohn

Table d'opération



Exaflex 6126

- ◆ table d'examen pour les domaines de l'odontostomatologie, ORL, ophtalmologie, gynécologie, dermatologie, urologie, microchirurgie etc.
- ◆ grande plaque de base 700 x 500 mm avec capot en acier inox
- ◆ assise en deux parties, dossier et repose-pied en alu coulé
- ◆ rails inox (25 x 10 mm) latéraux de l'assise, dossier et repose-pied
- ◆ têtière ordinaire extensible
- ◆ pièces métalliques émaillées RAL 9002
- ◆ sellerie selon nos échantillons (supplément pour sellerie antistatique).

Possibilités de réglage

- ◆ réglage de hauteur 60 - 90 cm par élévateur électromécanique avec capot en acier inox
- ◆ Trendelenbourg 20° commandé par ressort à gaz
- ◆ réglage du dossier +90° à -10° commandé par ressort à gaz
- ◆ réglage du repose-pied -4° à +90° commandé par ressort à gaz
- ◆ repose-pied entier et rallonge assise amovible par le desserrage de 2 manettes (version gynécologie)
- ◆ têtière extensible sur 20 cm (mécanisme de serrage)



Accessoires

pour les différents domaines médicaux: prière voir documentation séparée

Sauf modifications techniques!



Version gynécologie

- ◆ sans repose-pied et rallonge assise (déduction)
- ◆ Accessoires: – bac en inox
– jeu de deux repose-jambes avec chapes



Table d'opération


Exaflex 6126




Longueur de la table




Largeur de la table

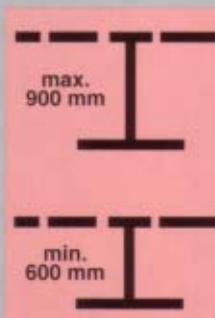


Montée/descente du plateau

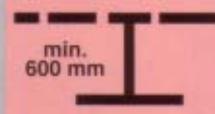


Montée/descente du plateau

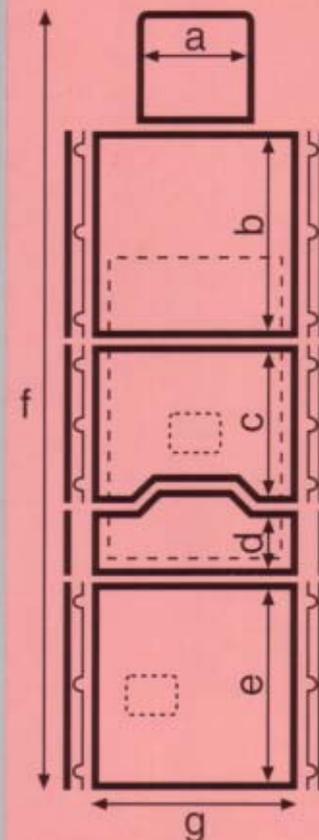


a = 310 x 190
b = 500
c = 350
d = 150
e = 470
f = 1990
g = 450

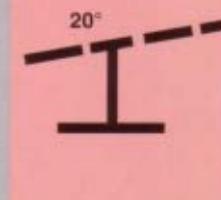


Position Trendelenbourg

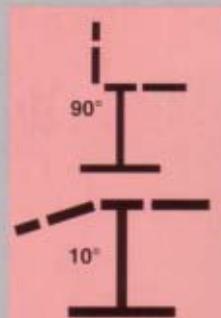

Réglages section dorsale

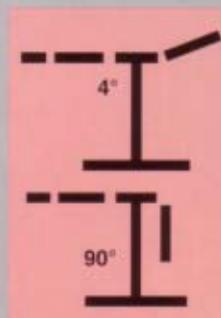

Réglages jambières

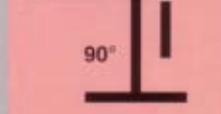

Réglages jambières

Caractéristiques techniques:

Dimensions:

Plaque de base: 700 x 500 mm

Rails d l'unité: 25 x 10 mm

Compensation de potentiel:

Fiche selon DIN 42801

Tension secteur: 230 V / 50 Hz

(autres tensions sur demande)

Tension de commande de l'interrupteur à pédale: 24 V (selon IEC 601-1)

Charge totale (ISO 6875): 135 kg

Emballage:

Matériel: Palette avec carton

Dimensions: Longueur 820 mm

Largeur 620 mm

Hauteur 1000 mm

Poids: Net 103 kg

Brut 124 kg

jörg&sohn

Equipements dentaires

Equipements médicaux

Podologie médicale