

Exaflex 3000



Operationstisch
Operating Table
Table d'Opération



jörg&sohn

Exaflex 3000



Operationstisch

Mobiler Mehrzweck-OP-Tisch für den universellen Einsatz in Klinik und Ambulanz. Durch optimale und sichere Patientenlagerung durch 5-, 6- oder 8-fach unterteilte, strahlendurchlässige Universal-Tischplatte vielseitig einsetzbar.

Sitz-, Rücken- und Beinplatte(n) sind beidseitig mit Normgeräteschienen aus Chrom-Nickel-Stahl versehen.

- ◆ Polsterauflagen 40 mm stark, Bezugstoff elektrisch leitfähig, Farbe schwarz (andersfarbige, nicht leitfähige Bezugstoffe möglich)
- ◆ Höhenverstellung mittels wartungsfreiem Hydraulik-Pumpeher
- ◆ Rückenplatte sowie Trendelenburg- und Antitrendelenburgposition gasfederunterstützt stufenlos und leicht vom Kopfende aus einstellbar
- ◆ stufenlos verstellbare Gallenbank und seitliche Kantung durch leichtgängige Kurbelgetriebe
- ◆ Tischrahmenkonstruktion aus Aluminium und Chrom-Nickel-Stahl, pulverbeschichtet RAL 9007
- ◆ Fahrfuß aus Chrom-Nickel-Stahl mit großen leichtgängigen Doppelrollen, feststellbar
- ◆ Säulenverkleidung aus Chrom-Nickel-Stahl
- ◆ Führungswinkel für Röntgenkassette beidseitig durchgehend
- ◆ sofortige Betriebsbereitschaft, netzunabhängig

Option

- ◆ in Längsrichtung um 230 mm verschiebbare Tischplatte

Empfohlenes Standardzubehör (siehe Abb.)

- ◆ Kopfstütze mit Doppelgelenk, großer Einstellbereich, seitlich verschiebbar, abnehmbar
- ◆ geteilte, abnehmbare Beinplatten, gasfederunterstützt stufenlos verstellbar

Sonstiges Zubehör

- ◆ siehe Preisliste

Technische Änderungen vorbehalten!

Operating Table

Mobile multi-purpose OP-table for the universal use in hospitals and the out-patient department. Multipurpose use by optimum, secure patient positioning, standard version with 5-, 6- or 8-fold subdivided radiolucent universal tabletop.

Stainless steel rails laterally on both sides on seat-, back- and leg plates.

- ◆ pads 40 mm thick, cover electrically conductive, colour black (other non-conductive colours also available)
- ◆ height-adjustment by maintenance-free hydraulic pump lift
- ◆ back plate as well as Trendelenburg-/anti-Trendelenburg position infinitely & simply adjustable from the head end of the table by support of gas spring
- ◆ fully adjustable gallbladder support and lateral tilt by means of smoothly running crank gears
- ◆ table frame construction of aluminium and stainless steel, powder coated RAL 9007
- ◆ mobile base made of stainless steel with large smoothly running twin castors, lockable
- ◆ column covering made of stainless steel
- ◆ passed through guide angles for X-ray-cassette on both sides
- ◆ immediately ready for use (free of maine)

Option

- ◆ longitudinal movement of table top 230 mm

Recommended Standard Accessories (see pic.)

- ◆ head rest with double joint, large adjusting area, laterally movable, removable
- ◆ divided removable leg plates, gas spring supported, fully adjustable

Other Accessories

- ◆ see price-list

Subject to technical modifications!



Exaflex 3000 mit Kopfstütze mit Doppelgelenk, geteilten Beinplatten und Gallenbank

Exaflex 3000 with head plate with double joint, divided leg plates and gallbladder support

Exaflex 3000 avec repose-tête à double joints, paire des plaques pour jambes séparées et banquette à bile

Table d'Opération

Table d'opération à fonction multiple pour l'emploi universel dans la clinique et dans le service ambulatoire. Emploi multiple par optimal et sûr positionnement du patient au moyen d'un plateau de table universel modèle standard à 5, 6 ou 8 sections et perméable aux rayons X.

Les plateaux du siège/du dossier et des jambes sont munis sur deux côtés des rails glissants standard en matériel acier chrome nickel

- ◆ épaisseur de matelassure: 40 mm, revêtement antistatique, couleur noir, (revêtements dans autres couleurs, non-antistatiques, sont aussi possible)
- ◆ ajustement de la hauteur par moyen d'un système d'élévation hydraulique avec pompe
- ◆ plateau dossier aussi bien que la position Trendelenburg/anti-Trendelenburg sont réglables simplement de la tête par ressort à gaz, à réglage continu
- ◆ banquette à bile à action progressive et inclinaison latérale par moyen d'un engrenage qui marche bien
- ◆ construction du châssis de table en matériel aluminium et en acier chrome-nickel, en peinture pulvérisée RAL 9007
- ◆ base mobile en acier chrome-nickel à grandes roulettes doubles, avec blocage
- ◆ revêtement du colonne en matériel acier chrome-nickel
- ◆ glissière de guidage pour cassette rayons X sans joints su deux côtés
- ◆ à usage immédiate, pas de branchement sur le réseau électrique nécessaire.



Option

- ◆ pisteau de table réglage longitudinal de 230 mm

Accessoires standards recommandés (voir ill.)


- ◆ têtière à double articulation, grande gamme de réglage, ajustable latéralement, démontable
- ◆ plateaux des jambes divisés, démontables, ressort à gaz, à réglage continu

Autres accessoires

- ◆ voir liste de prix

Sauf modifications techniques!

Exaflex 3000

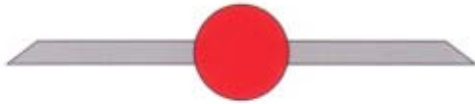

Operationstisch Operating Table Table d'Opération

Technische Daten

Abmessungen

Gewicht (mit Kopf- und Beinplatte)	165 kg
Höhe max.	1070 mm
Höhe min.	770 mm
Gesamtbreite (inkl. Geräteschienen)	590 mm
Breite der Liegefläche	540 mm
Länge gesamt	2000 mm
Rückenplatte	620 mm
Sitzplatte	425 mm
Beinplatte	620 mm

Verstellmöglichkeiten

Hub	300 mm
Rückenplatte, heben	75°
Rückenplatte, senken	45°
Beinplatte, heben	20°
Beinplatte, senken	90°
Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Kantung, rechts/links	20°
Gallenbank (optional)	130 mm
Längsverschiebung (optional)	230 mm

Verpackung

Maße	Länge	1200 mm
	Breite	800 mm
	Höhe	1000 mm

Gewicht Brutto ca. 190 kg

Technical Data

Dimensions

Weight - including head- and legplate(s)	165 kg	
Height max.	1070 mm	
Height min.	770 mm	
Total width from sliderail to sliderail	590 mm	
Width of table	540 mm	
Length	total	2000 mm
	back plate	620 mm
	seat plate	425 mm
	leg plate	620 mm

Possibilities of adjustment

Stroke	300 mm
Back plate, ascend	75°
Back plate, descend	45°
Leg plate, ascend	20°
Leg plate, descend	90°
Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Lateral tilt, right/left	20°
Gallbladder support (optional)	130 mm
Longitudinal movement (optional)	230 mm

Packing

Measurements length	1200 mm
width	800 mm
height	1000 mm

Weight gross ca. 190 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids	165 kg	
- inclusivement plateau(x) de tête et des jambes		
Hauteur max.	1070 mm	
Hauteur min.	770 mm	
Largeur totale d'un rail à l'autre	590 mm	
Largeur de table	540 mm	
Longueur	total	2000 mm
	plateau dossier	620 mm
	plateau siège	425 mm
	plateau jambe	620 mm


Possibilités de réglage

Levée de piston	300 mm
Plateau dossier, monter	75°
Plateau dossier, descendre	45°
Plateau jambe, monter	20°
Plateau jambe, descendre	90°
Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Inclinaison, droite/gauche	20°
Banquette à bile (optionalement)	130 mm
Réglage longitudinal (optionalement)	230 mm

Emballage

Dimensions	longueur	1200 mm
	largeur	800 mm
	hauteur	1000 mm

Poids brut ca. 190 kg

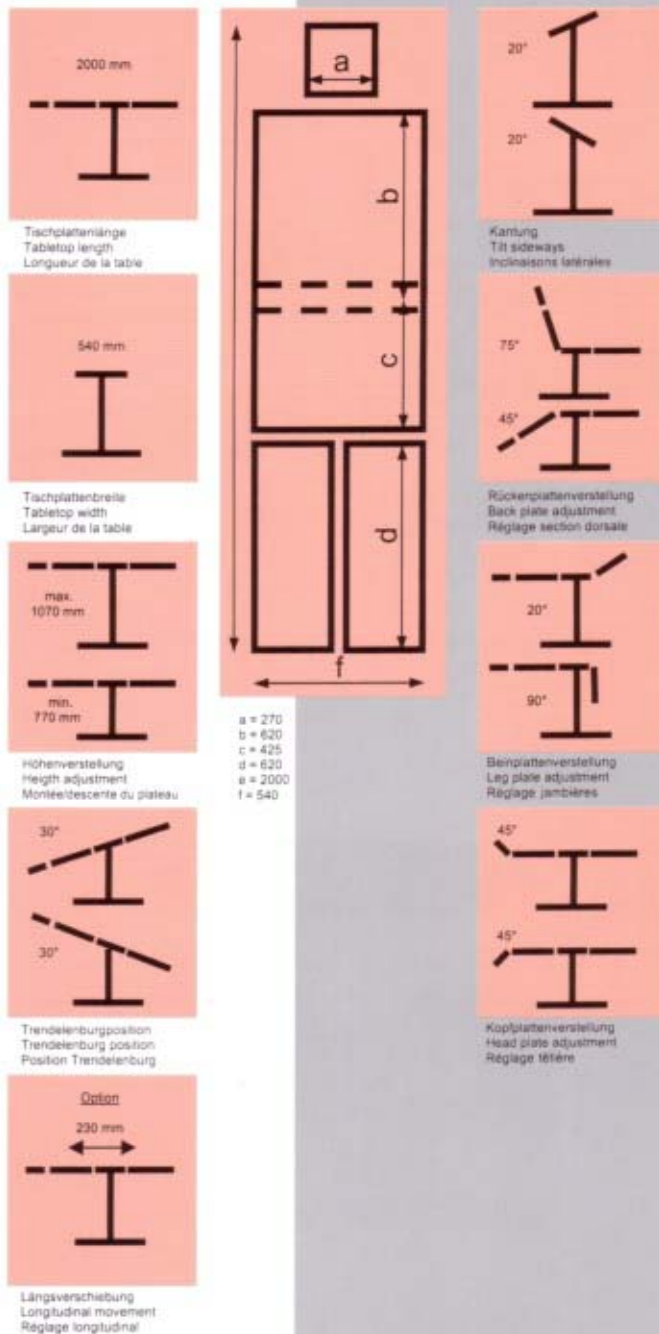

Lindenstraße 24 · D-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel. +49 (0)95 61/82 99-0

Fax +49 (0)95 61/82 99-37

e-Mail: info@joergundsohn.de

Internet: www.joergundsohn.de