


EXFLEX 4000

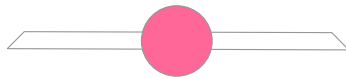

Operationstisch Operating Table Table d'Opération

Technische Daten

Patientengewicht	max. 210 kg
Gewicht (mit Kopf- und Beinplatte)	191 kg
Höhe max.	1140 mm
Höhe min.	780 mm
Hub	360 mm

Abmessungen der Tischplatte


Breite über Geräteschienen	700 mm
Tischbreite	650 mm
Länge	gesamt 2100 mm
	Rückenplatte 640 mm
	Sitzplatte 485 mm
	Beinplatte 620 mm

Verstellmöglichkeiten

Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Rückenplatte, heben	75°
Rückenplatte, senken	15°
Beinplatte, heben	20°
Beinplatte, senken	90°

Verpackung

Maße	Länge	1200 mm
	Breite	800 mm
	Höhe	1750 mm
Gewicht	Brutto	ca. 215 kg

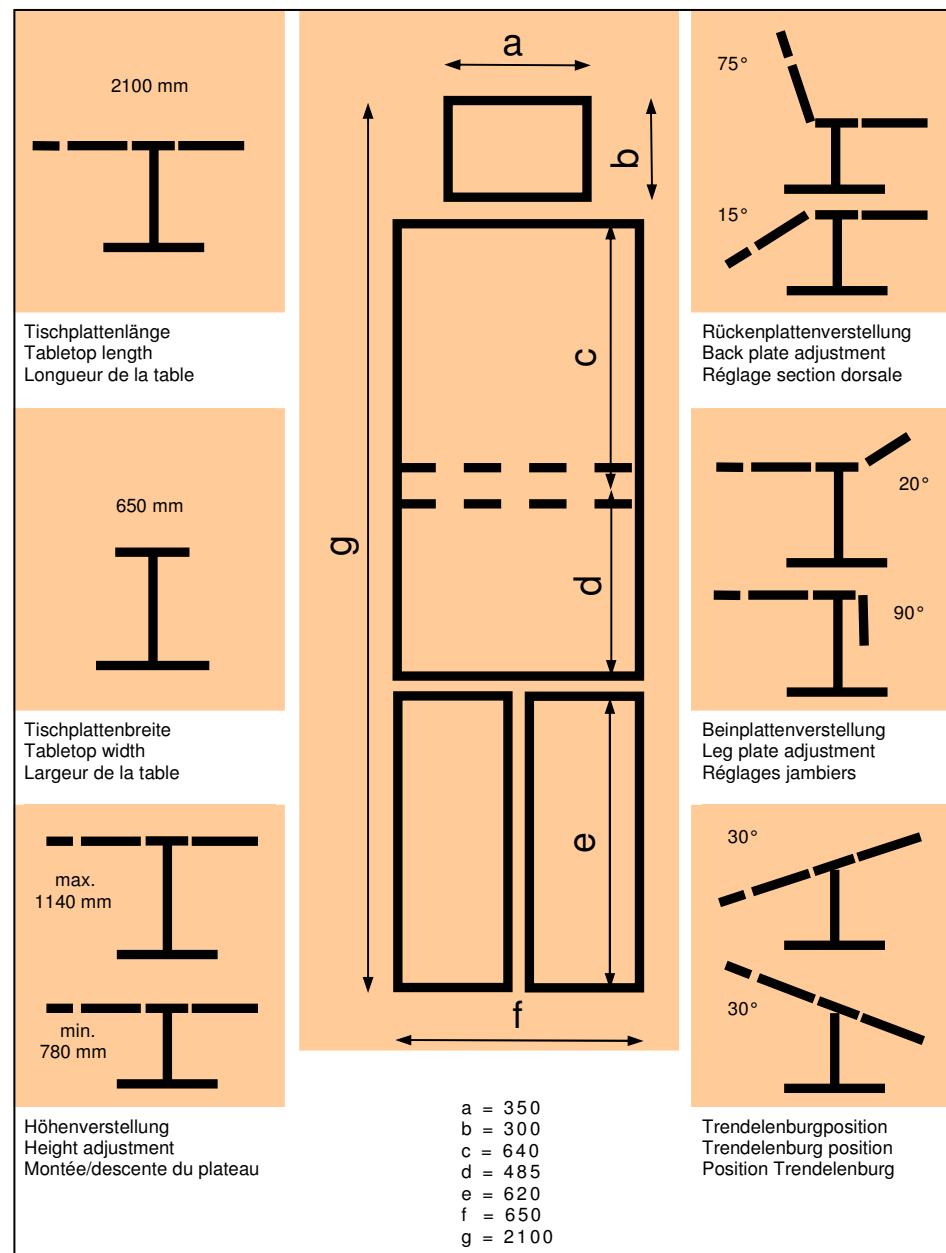

Technical Data

Patient Weight	max. 210 kg
Weight including head- and legplate	191 kg
Max. Height	1140 mm
Min. Height	780 mm
Stroke	360 mm

Measurements of tabletop

Width from sliderail to sliderail	700 mm
Width of table	650 mm
Length	total 2100 mm
	back plate 640 mm
	seat plate 485 mm
	leg plate 620 mm

Possibilities of adjustment

Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Back plate, ascend	75°
Back plate, descend	15°
Leg plate, ascend	20°
Leg plate, descend	90°

Packing

Measurements	length	1200 mm
	width	800 mm
	height	1750 mm
Weight	gross	approx. 215 kg

Caractéristiques Techniques

Capacité de charge	max. 210 kg
Poids – inclusivement plateau de tête et de jambe	191 kg
Hauteur max.	1140 mm
Hauteur min.	780 mm
Levée de piston	360 mm

Dimension de plaque de table

Largueur d'un rail à l'autre	700 mm
Largueur de table	650 mm
Longueur	total 2100 mm
	plateau dossier 640 mm
	plateau siège 485 mm
	plateau jambe 620 mm

Possibilités de réglage

Trendelenburg	30°
Anti-Trendelenburg	30°
Plateau dossier, monter	75°
Plateau dossier, descendre	15°
Plateau jambe, monter	20°
Plateau jambe, descendre	90°

Emballage

Dimensions	longueur	1200 mm
	largeur	800 mm
	hauteur	1750 mm
Poids	brut	ca. 215 kg

jörg&sohn
GmbH

Lindenstraße 24

DE-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel.: +49 (0) 95 61 / 82 99 - 0

Fax: +49 (0) 95 61 / 82 99 - 37

info@joergundsohn.de

www.joergundsohn.de

jörg&sohn

EXAFLEX 4000



Operationstisch
Operating Table
Table d'Opération



Neu!
New!
Nouveau!

Operationstisch, max. Patientengewicht 210 kg

Mobiler Mehrzweck-OP-Tisch für den universellen Einsatz in Klinik und Ambulanz. Durch optimale und sichere Patientenlagerung durch 4- oder 5-fach unterteilte, strahlendurchlässige Universal-Tischplatte vielseitig einsetzbar. Sitz-, Rücken- und Beinplatte(n) sind beidseitig mit Normgeräteschienen aus Chrom-Nickel-Stahl versehen.

- ♦ Polsterauflagen 60 mm stark, Bezugstoff elektrisch leitfähig, biokompatibel, Farbe schwarz,
- ♦ Höhen-, Rücken- und Trendelenburgverstellung mittels wartungsfreien, manuellen Hydraulik-Pumpensystem
- ♦ Tischrahmenkonstruktion aus Aluminium und Chrom-Nickel-Stahl, pulverbeschichtet RAL 9007
- ♦ Fahrfuß aus Chrom-Nickel-Stahl mit großen, leichtgängigen Doppelrollen, total- und richtungsfeststellbar
- ♦ Säulenverkleidung aus Chrom-Nickel-Stahl
- ♦ sofortige Betriebsbereitschaft

Empfohlenes Standardzubehör (siehe Abb.)

- ♦ Einfachkopfstütze, seitlich verschiebbar, abnehmbar
- ♦ geteilte, abnehmbare Beinplatten, gasfederunterstützt stufenlos verstellbar

Sonstiges Zubehör

siehe Preisliste

Technische Änderungen vorbehalten!

Operating Table, max. patient weight 210 kg

Mobile multi-purpose OP-table for the universal use in hospitals and the out-patient department. Multipurpose use by optimum, secure patient positioning, standard version with 4- or 5-fold subdivided radiolucent universal tabletop. Stainless steel rails laterally on both sides on seat-, back- and leg plate(s)

- ♦ pads 60 mm thick, cover electrically conductive, biocompatible, colour black
- ♦ height, back plate and longitudinal tilt be adjusted by maintenance-free manual hydraulic pump system
- ♦ table frame construction of aluminium and stainless steel, powder coated RAL 9007
- ♦ mobile base made of stainless steel with large smoothly running twin castors, total and directional lock
- ♦ column covering made of stainless steel
- ♦ immediately ready for use

Recommended Standard Accessories (see pic.)

- ♦ simple head rest, laterally movable, removable
- ♦ divided removable leg plates, gas spring supported, fully adjustable

Other Accessories

acc. price-list

Subject to technical modifications!



EXAFLEX 4000 mit
Standardkopfstütze und
geteilten Beinplatten

EXAFLEX 4000 with
standard head rest and
divided leg plates

EXAFLEX 4000 avec
repose tête et paire des
plaques pour jambes
séparées

Table d'Opération, poids max. du 210 kg

Table d'opération à fonction multiple pour l'emploi universel dans la clinique et dans le service ambulatoire. Emploi multiple par optimal et sûr positionnement du patient au moyen d'un plateau de table universel modèle standard à 4 ou 5 sections et perméable aux rayons X.

Les plateaux du siège/du dossier et des jambes sont munis sur deux côtés des rails glissants standard en matériel acier inoxydable

- ♦ épaisseur de matelassure: 60 mm, revêtement antistatique, biocompatible, couleur noir
- ♦ ajustement de la hauteur par moyen d'un système d'élévation hydraulique avec pompe et avec ce même système plateau dossier aussi bien que la position Trendelenburg/anti-Trendelenburg sont réglables
- ♦ construction du châssis de table en matériel aluminium et en acier inoxydable, en peinture pulvérisée RAL 9007
- ♦ base mobile en acier inoxydable à grandes roulettes doubles, avec blocage
- ♦ revêtement de la colonne en matériel acier inoxydable
- ♦ à usage immédiate

Accessoires standard recommandés (voir ill.)

- ♦ têtière simple
- ♦ plateaux des jambes divisés, démontables, à réglage continu avec ressort à gaz

Autres accessoires

voir liste de prix

Sauf modifications techniques!